

Avicenum

zdravotní komprese s benefity

www.avicenum.eu

MEDICO



... pro lehčí život!

ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE ARIES HOLDING

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

právě máte v rukou katalog zdravotní řady našich výrobků Avicenum. V rámci značky Avicenum nabízíme kompresivní produkty pro prevenci a léčbu křečových žil i otoků nohou, dále produkty určené pro léčbu lymfatických otoků a v neposlední řadě i ponožky pro diabetiky.

V loňském roce jsme uvedli na trh mnoho inovačních prvků v našich výrobcích, pro které jste byli impulsem právě Vy a také lékaři, se kterými úzce spolupracujeme. Vážíme si všech poznatků a připomínek, které se nám dostanou na stůl od všech našich zákaznických skupin a i nadále je naší prioritou vnímat zpětnou reakci zákazníků na naše výrobky. Spoustu inovací jsme připravili i pro rok nastávající.

Díky vlastnímu vývojovému centru můžeme všechna vylepšení výrobků flexibilně zapracovat. Mezi největšími novinkami minulých let byly speciální „minusové“ a „krátké“ velikosti u výrobků 2. kompresní třídy a implementace „zóny bezpečné komprese“ do nártové části produktů 3. kompresní třídy.

Nejzaváhavější novinkou roku 2016 jsou vzdušné samodržící stehenní punčochy Avicenum 360 FINE s plně zachovanou funkcí 2. kompresní třídy. K jejich vývoji jsme byli inspirováni zejména požadavky našich zákazníků.

Všem výrobkům zdravotní řady Avicenum jsme dali nový praktický obal s moderním designem. Spolu s tímto krokem jsme přistoupili i k efektivnějšímu označení výrobků etiketami (orientaci v nových etiketách se věnujeme na str. 22).

Avicenum je značkou zdravotních kompresivních výrobků s benefity, která usnadní život a pomůže se zdravotními potížemi. Je pro nás důležité, abyste se v našich výrobcích cítili komfortně a bezpečně, proto klademe důraz na výběr renomovaných dodavatelů všech materiálů. Vždy vybíráme materiály a aplikace prémiové kvality. Výrobky podrobujeme náhodnému testování a ověřování kvality dle nastavených parametrů certifikačními institucemi a zahraničními klinikami. Systém řízení kvality ve firmě ARIES, a.s. je certifikován dle normy ISO 9001:2015.

Rád bych Vaši pozornost upřel také na naši řadu sportovních kompresivních výrobků ROYAL BAY® a módní řadu punčochového zboží se zdravotními benefity. Bez obav se obraťte na naše medicínské reprezentanty s jakýmkoli dotazem. Jsme Vám rovněž k dispozici na bezplatné zákaznické lince 800 111 595.

Těšíme se na upevnění naší vzájemné spolupráce a přeji Vám, aby Vám naše výrobky i nadále přinášely úlevu a pomoc.



Obsah

Obsah	3
Piktogramy, špice a sedy	4
Křečové žíly a prevence	5
Materiály a kvalita (Mikrovlákno, Dlouhovlákná česaná bavlna, LYCRA®)	6
Materiály a kosmetotextil (Ovíjená LYCRA®, Sanitized® Silver)	7
Kosmetotextil (Skintex® AHL, DeoSoft)	8
Krajky, lemy, prevence	9
Zóna bezpečné komprese	10
Výrobky na míru	11
Avicenum 70	13 - 14
Avicenum 140	15 - 16
Avicenum 310	17
Avicenum ANTI-TROMBO PREMIUM	18
Avicenum 360	19 - 21
Avicenum 360 FINE	22
Avicenum 360 COTTON	23 - 24
Avicenum 360 ARM SLEEVE	24
Avicenum 520	25
Avicenum DiaFit	26
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY (Navlékač, Skleněný pilník Glasscare)	27
KOMPRESIVNÍ ÚČINKY VÝROBKŮ ŘADY AVICENUM	28
ŽILNÍ PORADNA, BAREVNICE	29
MĚŘENÍ A URČENÍ VELIKOSTI	30
VELIKOSTNÍ TABULKY	31
Kontakty	32

Provedení pažních návleků



Provedení punčochového zboží



Špice a sedy




zesílená špice



zesílená špice, pata




Inspekční otvor

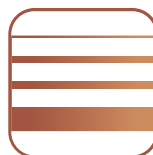


Krajka



Lem

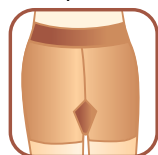

malý klín

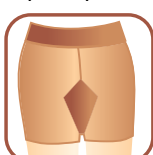


předozadní klín




průběžný klín



velký klín

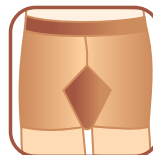

pánské

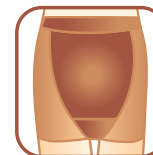

těhotenské

Křečové žíly a kompresivní terapie


Křečové žíly jsou problémem, který ve vyspělých evropských zemích postihuje 60 % žen a 30 % mužů. Onemocnění žilního systému je dlouhodobou záležitostí, jež vyžaduje úpravu životního stylu a téměř stálou léčbu. Základem této léčby je kompresivní terapie.

Křečové žíly (varixy) vznikají na základě dědičnosti, dalšími faktory jsou statická zátěž, sedavé zaměstnání, stáří, nedostatek pohybu, obezita nebo gravidita. Kromě těchto faktorů se na poškození žilních chlopní často podílí také zánět.

V důsledku poruchy funkce žilního systému se objevují známky chronické žilní nedostatečnosti, například křečové žíly, otoky dolních končetin, hemosiderinová pigmentace, žilní bérčové vředy a další.

Kompresivní punčochové výrobky

Princip ochrany žil pomocí punčochového zboží spočívá v tom, že v oblasti kotníku je vytvořen určitý tlak, který se směrem k pasu postupně snižuje. Je ověřeno, že taková opora žilních stěn účinně zlepšuje krevní oběh a podporuje návrat krve k srdci. Nohy Vás potom díky kompresivním punčochám nebolí a Vy se cítíte lépe a v dobré kondici. Kompresie nachází uplatnění také při léčbě lymfatických otoků paží.

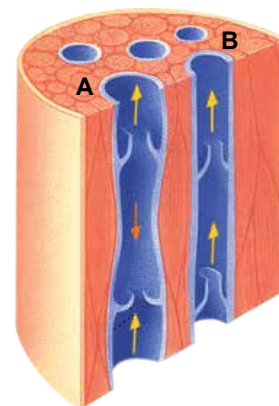

A – postižená žíla
B – zdravá žíla

Sedm rad pro prevenci křečových žil

Tak jako u řady jiných onemocnění i v případech prevence křečových žil hraje důležitou úlohu Váš životní styl.

Nabízíme Vám několik jednoduchých rad, jak pro své zdraví něco udělat.

- 1 Pohyb:** Chodte na procházky, běhejte, jezděte na kole nebo si zaplavte. Pohyb podporuje činnost svalové pumpy Vašich dolních končetin a tím i krevní oběh.
- 2 Jídelníček:** Dbejte na dostatečný přísun vitamínů C a E, vlákniny, vápníku, hořčíku a zinku.
- 3 Nohy na stole:** Najděte si přes den pár chvil a posadte se s nohama ve vyvýšené poloze. Podpoříte tak krevní oběh v dolních končetinách.
- 4 Nebraňte cirkulaci krve:** Vyvarujte se dlouhého stání nebo sezení, dávání nohy přes nohu, nošení příliš těsných kalhot nebo vysokých podpatků.
- 5 Studená sprcha:** Dopřejte svým nohám studenou sprchu nebo studené obklady.
- 6 Zacvičte si:** Zkuste kroužit kotníky oběma směry, propínat a krčit prsty nohou a celé nártý, přitahovat pokrčené nohy k hrudníku a následně je propínat nebo v lehu na zádech šlapat jako na kole. Některá z těchto cvičení můžete dělat i v kanceláři nebo čekárně.
- 7 Podpůrné punčochy:** Noste podpůrné punčochy nebo podkolenky. Kvalitní podpůrné zboží dnes již na první pohled nerozeznáte od běžných punčoch a nabídka je široká. Vždy se však ujistěte, že Vámi zvolený model má lemy nebo krajky, které neškrtní, nezpůsobují otoky a nebrání cirkulaci krve.

Co je to DEN?

Denier (DEN) vyjadřuje sílu použitého textilního vlákna. Čím je číslo vyšší, tím silnější (méně průhledný) je výrobek.

Fyzikálně je denier definován jako délková hmotnost vlákna. Označuje, kolik gramů váží devět kilometrů použité příze.

Materiály a kvalita

Na kvalitu dbáme od samého začátku. Navrhujeme kvalitní výrobky, vybíráme ty nejlepší materiály, pečlivě je zpracováváme a snažíme se přidat ještě něco navíc.

Nylon (polyamid) je základem punčochy. Ve výrobcích Avicenum proto používáme pouze značkovou polyamidovou přízi PAD 6.6 od předních výrobců ze Švýcarska, Itálie a Francie.

LYCRA® se stala synonymem pro elestan. V punčochách Avicenum její pomocí vytváříme požadovanou kompresi. LYCRA® je garantem kvalitního, funkčního a trvanlivého výrobku.

Certifikáty nezávislých institucí doplňují náš přísný interní systém kvality.



Mikrovlákno



Mikrovlákno je příze spředená z vysokého počtu tenoučkových vláken. Deset kilometrů jednoho takového vlákna neváží ani celý gram. Výrobky z mikrovlákna jsou velice příjemné na omak, pohodlně se nosí, lépe sají a odvádějí pot, mají moderní sametový nádech a vyznačují se delší trvanlivostí. To vše jsou důvody, proč mikrovlákno používáme ve všech našich punčochách druhé a třetí kompresní třídy. Tedy i tam, kde je často považováno za nadstandard.

Dlouhovlákná česaná bavlna



Pro výrobu produktů Avicenum s podílem bavlny používáme výhradně dlouhovláknou česanou bavlnu. Vlákno takové bavlny je až třikrát delší než u běžné obyčejné bavlny. Tento typ materiálu zajišťuje dostatečné překrývání vláken v úpletu. Důsledkem použití tohoto vysoce kvalitního materiálu zůstává výrobek déle funkční.

LYCRA®



LYCRA® je obchodní název pro elastan vyvinutý firmou DuPont, nyní technologický vývoj a inovace elastanu LYCRA® řídí společnost Invista. Jedná se o vlákno, které zaručuje, že elasticita materiálu bude perfektní po celou dobu jeho životnosti. Jedinečná schopnost vlákna roztáhnout a vrátit se do původního stavu zlepšuje vlastnosti všech výrobků obsahující tento patentovaný materiál. Díky vláknu LYCRA® kompresivní produkty výborně přilnou ke končetině, skvěle drží. Výrobky s vláknem LYCRA® se navíc vyznačují zvýšenou nemačkovostí.



Ovíjená LYCRA® pro citlivou pokožku a delší životnost výrobků

Holé vlákno elastanu může dráždit citlivou pokožku. LYCRU® proto ovíjíme dvojitým ochranným vláknem. Použití ovíjené LYCRU® přispívá nejen ke zvýšení komfortu nošení, ale i k delší životnosti výrobku.

Neděláme kompromisy a luxusní dvojitě ovíjenou LYCRU® používáme ve všech výrobcích Avicenum.

Kosmetotextil

Sanitized® Silver - Ionty švýcarského antimikrobiálního stříbra



Pro ochranu a zdraví Vašich nohou

a neobsahuje potenciálně problematické nanostříbro.

Úprava Sanitized® Silver je ve výrobcích Avicenum aplikována přímo na povrchu textilních vláken, tedy tam, kde dochází k množení bakterií a plísní. Stříbro spolehlivě účinkuje proti širokému spektru mikroorganismů. Ionty pronikají jejich buněčnou stěnou


Sanitized® Silver je špičková **antimikrobiální úprava** od renomované švýcarské společnosti Sanitized®. Vyniká svou stálostí, naprostou nezávadností a vysokou účinností. Pracuje na **bázi iontů stříbra**

a zamezí přísunu kyslíku a živin. Spolehlivě tak zabrání dalšímu množení a vzniku kolonií, které jsou často rezistentní i vůči běžnému pracímu cyklu.


Stříbro díky tomu působí jako **deodorant**, zabraňuje vzniku nepříjemných pachů a zpříjemňuje každodenní nošení punčoch. Současně chrání textilní vlákna před poškozením a zvyšuje trvanlivost výrobku.

Patentovaná úprava Sanitized® Silver je vysoce stálá, zcela bezpečná pro lidský organismus i životní prostředí a byla úspěšně dermatologicky testována.

Společnost ARIES **garantuje**, že ve výrobcích Avicenum nepoužívá nanostříbro.

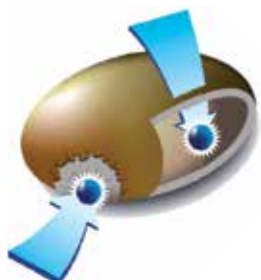

Působení stříbra na bakterie

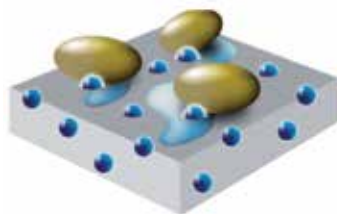

Ve vlhkém prostředí ionty stříbra lokalizují a deaktivují bakterie.



Neupravené vlákno



Upravené vlákno

Mikrokapsle Skintex® Anti-Heavy-Legs (AHL) Proti pocitu těžkých nohou



Mikrokapsle jsou drobné chitosanové skořápky vyráběné z výtažků ze schránek mořských garnátů. Uvnitř v sobě nesou pečlivě vybrané účinné látky.

Kapsle jsou fixovány na povrchu textilních vláken, přímo tam, kde dochází ke kontaktu s pokožkou a kde je jejich působení nejúčinnější. Díky pevné vazbě kapsle odolávají i opakovanému praní. Během nošení punčoch postupně **uvolňují účinné látky**. Dlouhodobě tak pečují o zdraví a dobrou kondici nohou. Rozdíl je skutečně znatelný. Od prvního okamžiku.

Značkové německé **mikrokapsle Skintex® Anti-Heavy-Legs** pomáhají předcházet pocitu těžkých nohou, vyživují a hydratují pokožku a díky obsahu mentolu chladí a osvěžují. Říkáme jim též „bylinky“.

Grapefruit pomáhá obnově kožních buněk.



Citron dodává svěžest a vitalitu.

Mentol osvěží a zchladí.

Tymián jemně dezinfikuje pokožku.

Cypřiš podporuje krevní oběh a omezuje nadměrné pocení.

Urea hydratuje pokožku a má antimikrobiální účinky.

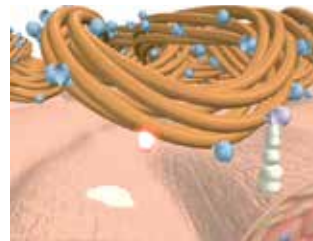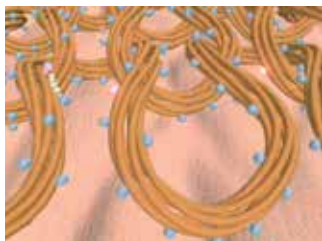


Mikrokapsle Skintex® Active Care na textilních vláknech

DeoSoft - Dotek hebkosti

DeoSoft je úprava, kterou jsme pro Vás objevili ve Švýcarsku. Díky DeoSoftu jsou naše punčochy ještě **měkčí a hebkčí**. Přípravek současně zvyšuje savost textilních vláken, která nyní lépe **odvádějí pot a vlhkost** od těla. Výsledkem je větší pohodlí při nošení punčoch.



Úpravu DeoSoft aplikujeme na všechny výrobky Avicenum 360 s mikrokapslemi AHL. Efekt je stálý a odolává praní.

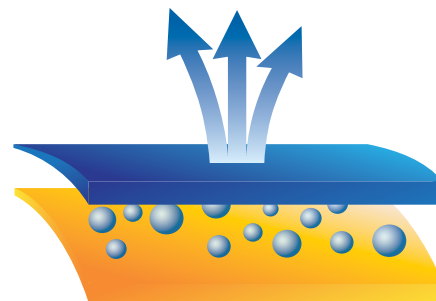

DeoSoft zajišťuje lepší odvádění potu a vlhkosti od těla.

Lemy a krajky punčoch

Krajky a lemy našich produktů nejsou pouze estetickým zakončením punčochy, důsledně dbáme na jejich funkčnost a pohodlnost.

Naše **krajka** obsahuje příčně vložené **lamely**, které znemožňují její nepříjemné shrnování. Krajka je z vnitřní strany opatřena třemi silikonovými proužky, díky kterým **na noze dobře drží**.

Lem je optimální volbou pro pacienty s velmi citlivou pokožkou. Rozmístění silikonu do puntíků zajišťuje jeho dobrou prodyšnost při zachování správného držení punčochy.



Tip: Neperte punčochy v aviváži, silikon poté ztrácí svoji lepivost. Na nakrémovaných končetinách silikon rovněž nedrží. Lepivost silikonu můžete navrátit otřením lihovou bází.



Zdravotní lemy ponožek a podkolenek

Zdravotní lemy ponožek a podkolenek jsou pohodlné, nezanechávají otlinky a neomezují krevní oběh v noze. Naše zdravotní lemy jsou výsledkem dlouhého vývoje, testování a zkoušek. Byly testovány také nezávislou akreditovanou laboratoří ITC Zlín.



Desatero prevence křečových žil



1. ROZHÝBEJTE NOHY PŘES DEN



2. JEZTE ZDRAVĚ



3. ROZHÝBEJTE NOHY PŘED SPANÍM



4. DOPŘEJTE SI CHLADIVÉ OSVĚŽENÍ



5. ČASTO MASÍRUJTE



6. SPORTUJTE



7. NOSTE OBUV S NÍZKÝM PODPATKEM



8. NOSTE POKHODLNÉ OBLEČENÍ



9. SCHOVEJTE SE DO STÍNU



10. NAVŠTĚVUJTE LÉKAŘE

Zóna bezpečné komprese

Zóna bezpečné komprese je prvkom, ktorý jsme implementovali u lýtkových a stehenních punčoch Avicenum 520, punčoch 3. kompresní třídy s velmi silným tlakem v oblasti kotníku (34 - 46 mmHg). Jedná se o speciální technologii pletení v oblasti nártu nohy. Nárt je kritickým bodem při oblékání punčoch, ale navíc s ohledem na ohýbání nohy/chodidla může docházet právě v této oblasti k nepříjemnému hromadění materiálu punčochy a tím k nežádoucímu přiškrcení nohy.

Proto jsme tuto zónu vyřešili jemnějším pletením tak, abychom snížili hustotu materiálu a jeho hromadění v inkriminovaných místech předcházeli. Nošení takto silné komprese je díky naší unikátní technologii komfortnější a bezpečnější.



Punčochy se zúženým obvodem stehna (mínusová velikost)

Máte úzké stehno a punčochy Vám padají?

Někteří pacienti trpící oběhovými potížemi mají atypický tvar dolní končetiny. Muži typicky mají stehenní část nohy útlejší než ženy. Ve vyšším věku navíc může u pacientů docházet k úbytku svalové hmoty stehna.

Při zásadním anatomickém nepoměru je nutno vyrobit punčochy na míru (formulář žádejte u našich medical reprezentantů či na info@aries.eu).

Při mírném nepoměru přinášíme řešení v podobě punčoch se zúženým obvodem stehna. Ve spolupráci s odbornými lékaři vznikla nová velikostní řada, kterou označujeme znaménkem mínus a která je užší v obvodovém bodě g.

Provedení: lem, otevřená špice.



Punčochy s krátkou délkou (SHORT)

Je krátká velikost stále příliš dlouhá?

Může se stát, že i přes pečlivé přeměření doma, v ordinaci i zdravotnických potřebách punčochy nesedí a jsou příliš dlouhé. Přestože míry odpovídají tabulce.

Právě pro tyto případy je tu novinka ještě kratších punčoch. K velikosti „NORMAL“ tak přibývá velikost „SHORT“. U této nové velikostní řady jsme výrazně zkrátili délku punčochy. Vycházíme tak vstříc naléhavé poptávce trhu a věříme, že velikost SHORT uspokojí nemalou skupinu pacientů.

Provedení: krajka, otevřená špice.



V řadě Avicenum najdete více než 25 sériově vyráběných velikostí kompresivních punčoch. I přesto se může stát, že některým pacientům nebude žádná z nich vyhovovat. ARIES nabízí individuální přístup a řešení pro atypické rozměry končetin. Přímou na míru vyrobíme punčochu nebo pažní návlek pro každého pacienta.

V dobrých zdravotnických potřebách, lékárnách či v ambulancích odborných lékařů odebere vyškolený personál míry pacienta a zajistí vše potřebné. Výběr takového pracoviště je velmi důležitý, protože je plně zodpovědné za naměřené hodnoty. Aby nové punčochy dobře seděly, doporučujeme měření vždy v ranních hodinách, dokud jsou končetiny svěží a bez otoků.

Punčochy na míru jsou hrazeny 1x za půl roku v plné výši, úhrada

podléhá schválení revizního lékaře zdravotní pojišťovny pacienta. Nemusíte však být závislí na rozhodnutí pojišťovny, punčochy na míru můžeme vyrobit i na Vaše vlastní přání. Zaplatíte si je sice sami, ale obdržíte je mnohem dříve a doručíme Vám je až domů.

Kontaktní osobou pro komunikaci ohledně výroby na míru je paní Eva Pacholíková, která Vám poskytne jak objednávkový formulář s měřenkou, tak případně další informace. Kontaktovat ji můžete na emailu: pacholikova@aries.eu nebo na telefonním čísle **739 787 611**.

Rovněž se můžete obrátit na našeho medical reprezentanta, který Vás rovněž vybaví potřebnými informacemi o postupu výroby či objednávkovým formulářem s měřenkou.

Avicenum 360/520 na míru	KÓD ZP	KT	ÚHRADA ZP	DOPLATEK
Lýtkové punčochy, stehenní punčocha s úchytem v pase, návlek bez rukavice	0045400	2./3.	Dle kalkulačního listu výrobce	0,00 Kč
Stehenní, polostehenní punčochy, pažní návlek komplet+rukavice, kalhoty punčochové	0045401	2./3.		
Speciální složitá výroba - atypické míry HK a DK návlek komplet s úchytem	0045402	2./3.		

Medical reprezentanti:

Praha (hnědá)	Lenka Formanová	605 299 502	formanova@aries.eu
Hradec Králové (červená)	Mgr. Josef Sejtka	605 299 516	sejtka@aries.eu
Olomouc (zelená)	Pavel Utíkal	605 299 503	utikal@aries.eu
Ostrava (modrá)	Miroslav Pavelec	605 299 504	pavelec@aries.eu
Plzeň (růžová)	Libuše Rozumová	605 299 505	rozumova@aries.eu
Ústí nad Labem (žlutá)	Mgr. Eva Polášková	605 299 508	polaskova@aries.eu
Brno (šedá)	Helena Kesslerová	605 299 519	kesslerova@aries.eu




Prevence, podpora léčby a kompresivní terapie křečových žil a otoků nohou



Avicenum 70 - prevence křečových žil a otoků nohou

Podpůrné punčochové zboží Avicenum 70 zlepšuje krevní oběh, je **účinnou prevencí** tvorby křečových žil, zabraňuje vzniku občasných otoků a zmírňuje pocity bolesti a únavy nohou. Při každodenním nošení oceníte také švýcarské antimikrobiální stříbro Sanitized® Silver.

Složení: 76 % Nylon, 24 % Lycra®

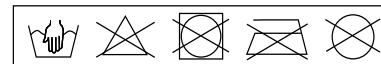

Lýtkové punčochy TRAVEL



Úprava:	Mikrokapsle - Skintex® AHL			
Obchodní název:	Avicenum TRAVEL 70 lýtkové punčochy			
Velikosti:	36 - 38	39 - 41	42 - 44	45 - 47
Barvy:	0000	7007	8001	9999
	0000 pouze u velikosti 39 - 41			
Balení:	1 pár v krabičce, 16 krabiček v kartonku			

Lýtkové punčochy



Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver			
Obchodní název:	Avicenum 70 lýtkové punčochy			
Velikosti:	36 - 38	39 - 41	42 - 44	
Barvy:	0000	7007	8001	8003 9999
	0000 pouze u velikosti 36 - 38, 39 - 41			
Balení:	1 pár v krabičce, 16 krabiček v kartonku			

Stehenní samodržící punčochy s KRAJKOU



Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver			
Obchodní název:	Avicenum 70 stehenní punčochy			
Velikosti:	M	L	obvod stehna 50 - 60 cm	
Barvy:	7006	8001	8003	9999
Velikosti:	XL	obvod stehna nad 60 cm		
Barvy:	8001	9999		
Balení:	1 pár v krabičce, 8 krabiček v kartonku			

Punčochové kalhoty



Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver				
Obchodní název:	Avicenum 70 punčochové kalhoty				
Velikosti:	Malý klín		Velký klín		
	S		S+		
	M		M+		
	L		L+		
	XL		XL+		
Barvy:	7006	8001	8003	8005	9999
Balení:	1 kus v krabičce, 8 krabiček v kartonku				

Punčochové kalhoty těhotenské MATERNITY



Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver		
Obchodní název:	Avicenum 70 punčochové kalhoty, těhotenské		
Velikosti:	M	L	XL
Barvy:	8001		9999
Balení:	1 kus v krabičce, 8 krabiček v kartonku		

V období těhotenství je žena vystavena největšímu riziku vzniku žilního onemocnění. Od počátku 4. měsíce doporučujeme používat těhotenské punčochové kalhoty Avicenum 70, které mají speciální konstrukci v oblasti břicha.

Punčochové kalhoty pánské GOLDWEAR




Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver				
Obchodní název:	Avicenum 70 punčochové kalhoty, pánské				
Velikosti:	M	L	XL	XXL	3XL
Barvy:	8003	9999			
Balení:	1 kus v krabičce, 8 krabiček v kartonku				

Avicenum 140 podpora léčby křečových žil a otoků nohou

Zdravotní punčochové zboží první kompresní třídy **zmírňuje projevy** počínající žilní nedostatečnosti a pocity únavy a napětí v nohou. Při každodenním nošení oceníte také švýcarské antimikrobiální stříbro **Sanitized® Silver**. Trvanlivost výrobku výrazně prodlužuje zesílená pata.

Složení: 69 % Nylon, 31 % Lycra®

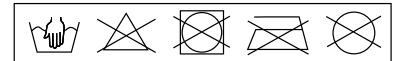

Lýtkové punčochy **JEMNÉ**



**NOVÁ
ÚPRAVA**

Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver	
Obchodní název:	Avicenum 140 JEMNÉ lýtkové punčochy	
Velikosti:	Normal S normal M normal L normal	Long S long M long L long
Barvy:	8001	9999
Balení:	1 pár v krabičce, 16 krabiček v kartonku	

Lýtkové punčochy **SILNÉ**



Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver	
Obchodní název:	Avicenum 140 SILNÉ lýtkové punčochy	
Velikosti:	Normal S normal M normal L normal	Long S long M long L long
Barvy:	8001	9999
Balení:	1 pár v krabičce, 16 krabiček v kartonku	

Stehenní samodržící punčochy **JEMNÉ s KRAJKOU**



**NOVÁ
ÚPRAVA**


Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver			
Obchodní název:	Avicenum 140 JEMNÉ stehenní punčochy			
Velikosti:	Normal		Long	
	S normal		S long	
	M normal		M long	
	L normal		L long	
Barvy:	7007	8001	8080	9999
Balení:	1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku			

Stehenní samodržící punčochy **SILNÉ s LEMEM**



Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver			
Obchodní název:	Avicenum 140 SILNÉ stehenní punčochy			
Velikosti:	Normal		Long	
	S normal		S long	
	M normal		M long	
	L normal		L long	
Barvy:	8001			
Balení:	1 pár v krabičce, 8 krabičky v kartonku			

Punčochové kalhoty

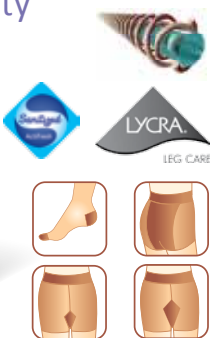

**NOVÁ
ÚPRAVA**


Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver			
Obchodní název:	Avicenum 140 punčochové kalhoty			
Velikosti:	Malý klín	Velký klín	Předozadní klín	
	S normal	M normal	L normal	
	S long	M long	L long	
Barvy:	7007	8001	8080	9999
Balení:	1 kus v krabičce, 4 krabičky v kartonku			

Avicenum 310 podpora léčby křečových žil a otoků nohou

Zdravotní punčochové výrobky 1. kompresní třídy s 60% podílem bavlny přispívají k opoře žilních stěn, účinně zlepšují krevní oběh a zabraňují bolestivému otékání dolních končetin.

Jsou vhodné k celodennímu nošení, pro dlouhodobé stání i sezení. Současně jsou určeny i ke sportovním aktivitám a k cestování.

Složení: 60 % Bavlna, 28 % Nylon, 12 % Lycra®

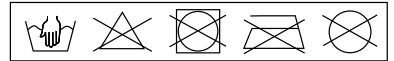

Unisex zdravotní bavlněné podkolenky



Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver			
Obchodní název:	Avicenum 310 podkolenky			
Velikosti:	36 - 38	39 - 41	42 - 44	45 - 47
Barvy:	0000 8080	5090 9999	7007	8002
Balení:	1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku			

Unisex zdravotní bavlněné podkolenky TRAVEL




Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver			
Obchodní název:	Avicenum TRAVEL 310 podkolenky			
Velikosti:	36 - 38	39 - 41	42 - 44	45 - 47
Barvy:	0000 8080	5090 9999	7007	8002
Balení:	1 pár v obalu s háčkem v sáčku			

1. kompresní třída (18 - 21 mmHg)

Antitrombotické punčochy

jsou určeny **pro ležící pacienty**, u kterých snižují riziko vzniku krevních sraženin.

Punčochy jsou ošetřeny švýcarským antimikrobiálním **stříbrem Sanitized® Silver**.

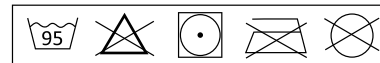

Složení: 70 % Nylon, 30 % Lycra®

Zdravotní punčochy **LÝTKOVÉ**

Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver				
Obchodní název:	Avicenum ANTI-TROMBO PREMIUM lýtkové punčochy				
Velikosti:	S	M	L	XL	XXL
Barva:	0000				
Provedení:	s inspekčním otvorem pod prsty				
Balení:	1 pár v sáčku				

Zdravotní punčochy **STEHENNÍ s LEMEM**

Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver				
Obchodní název:	Avicenum ANTI-TROMBO PREMIUM stehenní punčochy				
Velikosti:	S	M	L	XL	XXL
Barva:	0000				
Provedení:	s inspekčním otvorem pod prsty				
Balení:	1 pár v sáčku				


Inspekční otvor



Avicenum 360 kompresivní terapie křečových žil a otoků nohou

Zdravotní punčochy 2. kompresní třídy podporují správnou funkci žilních chlopní, stabilizují krevní oběh a jsou nenahraditelnou součástí **kompresivní terapie**.

Složení: 60 % Nylon, 40 % Lycra®

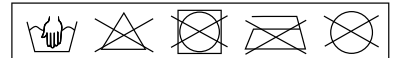

Zdravotní lýtkové punčochy



Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver				
Obchodní název:	Avicenum 360 lýtkové punčochy				
Velikosti:	S normal	M normal	L normal	XL normal	XXL normal
	S long	M long	L long	XL long	XXL long
Barvy:	8001	9999			
Provedení:	otevřená špice		uzavřená špice		
Balení:	1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku				
KÓD ZP 0045774	MAX. ÚHRADA ZP 410,- Kč		DOPLATEK PACIENTA 14,- Kč		

Zdravotní lýtkové punčochy



Úprava:	Mikrokapsle - Skintex® AHL - do vyprodání zásob			
Obchodní název:	Avicenum 360 lýtkové punčochy			
Velikosti:	S normal	M normal	L normal	XL normal
	S long	M long	L long	XL long
Barva:	8001			
Provedení:	otevřená špice			
Balení:	1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku			
KÓD ZP 0045773	MAX. ÚHRADA ZP 410,- Kč		DOPLATEK PACIENTA 14,- Kč	

Zdravotní stehenní samodržící punčochy s **KRAJKOU**



Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver				
Obchodní název:	Avicenum 360 stehenní punčochy				
Velikosti:	S normal S+ normal S long S+ long	M normal M+ normal M long M+ long	L normal L+ normal L long L+ long	XL normal XL+ normal XL long XL+ long	XXL normal XXL long
Barvy:	8001	8080	9999	8080 není u „+“ velikostí a velikosti 5.	
Provedení:	otevřená špiče		uzavřená špiče		
SPECIÁLNÍ VELIKOST					
KRÁTKÁ DÉLKA	S short	M short	L short	XL short	
Barva:	8001				
Provedení:	otevřená špiče				
Balení:	1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku				
KÓD ZP 0045776	MAX. ÚHRADA ZP 600,- Kč		DOPLATEK PACIENTA 48,- Kč		

Zdravotní stehenní samodržící punčochy s **LEMEM**



Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver				
Obchodní název:	Avicenum 360 stehenní punčochy				
Velikosti:	S normal S+ normal S long S+ long	M normal M+ normal M long M+ long	L normal L+ normal L long L+ long	XL normal XL+ normal XL long XL+ long	XXL normal XXL long
Barvy:	8001	9999			
Provedení:	otevřená špiče		uzavřená špiče		
SPECIÁLNÍ VELIKOST					
UŽŠÍ OBVOD STEHNA	S- normal S- long	M- normal M- long	L- normal M- long	XL- normal XL- long	
Barva:	8001				
Provedení:	otevřená špiče				
Balení:	1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku				
KÓD ZP 0045786	MAX. ÚHRADA ZP 600,- Kč		DOPLATEK PACIENTA 48,- Kč		

Zdravotní stehenní samodržící punčochy s **KRAJKOU**



Úprava:	Mikrokapsle - Skintex® AHL - do vyprodání zásob			
Obchodní název:	Avicenum 360 stehenní punčochy			
Velikosti:	S normal S+ normal S long S+ long	M normal M+ normal M long M+ long	L normal L+ normal L long L+ long	XL normal XL+ normal XL long XL+ long
Barvy:	8001			
Provedení:	otevřená špice			
Balení:	1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku			
KÓD ZP 0045775	MAX. ÚHRADA ZP 600,- Kč	DOPLATEK PACIENTA 48,- Kč		

Zdravotní punčochové kalhoty



Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver	
Obchodní název:	Avicenum 360 punčochové kalhoty	
Velikosti:	Malý klín S normal M normal S long M long	Velký klín L normal XL normal L long XL long
Barvy:	8001	9999
Provedení:	uzavřená špice	
Balení:	1 kus v krabičce, 4 krabičky v kartonku	
KÓD ZP 0192090	MAX. ÚHRADA ZP 950,- Kč	DOPLATEK PACIENTA 34,- Kč

FINE


Avicenum 360 FINE kompresivní terapie křečových žil a otoků nohou

Vzdušné zdravotní punčochy FINE s jemnou strukturou a plně zachovanou funkcí 2. kompresní třídy. Novinka byla vyvinuta pro komfortní pocit při nošení. Avicenum FINE umožňuje kombinovat léčbu s radostí z plně aktivního společenského života díky vzhledu módní punčochy.

Zdravotní samodržící stehenní punčochy s **KRAJKOU**

NOVINKA

Složení: 60 % Nylon, 40 % Lycra®

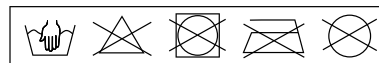

Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver			
Obchodní název:	Avicenum 360 FINE stehenní punčochy			
Velikosti:	S normal	M normal	L normal	XL normal
	S long	M long	L long	XL long
Barva:	8001			
Provedení:	otevřená špiče			
Balení:	1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku			


Jak číst v nových etiketách Avicenum



Úprava Sanitized® Silver



Úprava Skintex® AHL

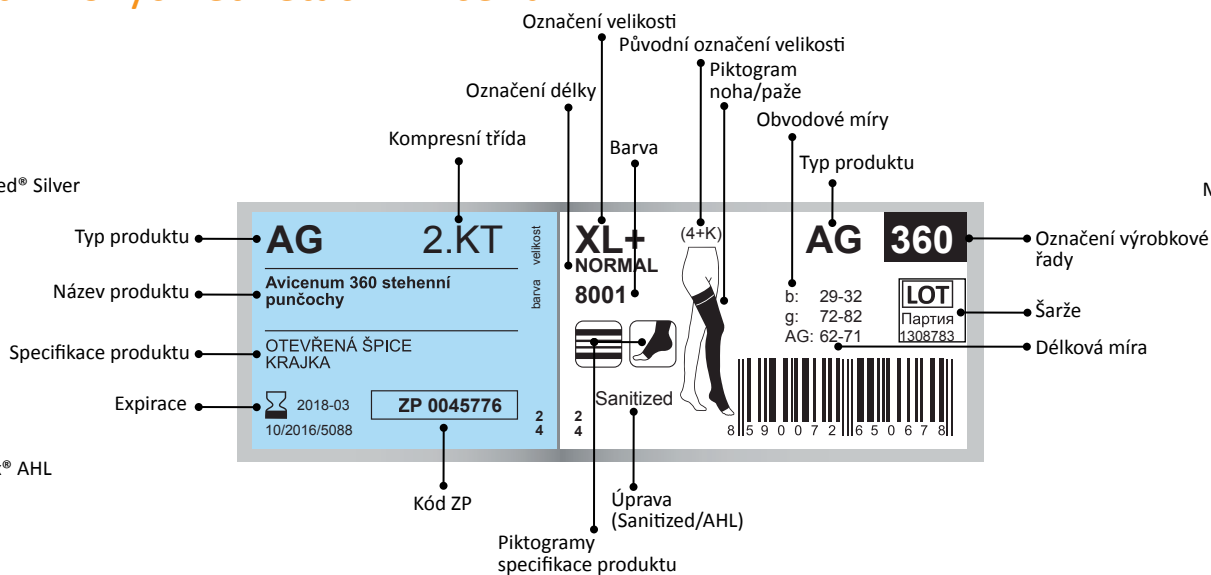


Avicenum 360 COTTON kompresivní terapie křečových žil a otoků nohou


Zdravotní punčochy druhé kompresní třídy s **vysokým podílem bavlny (60 %)** jsou vhodné zejména pro pacienty s citlivou pokožkou. I přes vysoký obsah bavlny punčochy na noze drží a nepovolují. Bavlna je doplněna příjemným **mikrovláknem** a dvojitě ovíjenou LYCROU®.

Punčochy Avicenum 360 COTTON podporují správnou funkci žilních chlopní, stabilizují krevní oběh a jsou určeny **pro kompresivní terapii**.

Složení: 60 % Bavlna, 35 % Lycra®, 5 % Nylon

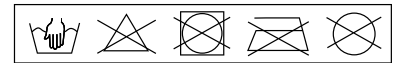


Zdravotní lýtkové punčochy

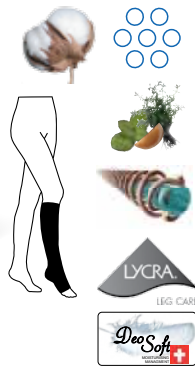

Úprava:	Mikrokapsle - Skintex® AHL - do vyprodání zásob			
Obchodní název:	Avicenum 360 COTTON lýtkové punčochy			
Velikosti:	S normal	M normal	L normal	XL normal
	S long	M long	L long	XL long
Barva:	8001			
Provedení:	otevřená špice			
Balení:	1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku			
KÓD ZP 0161106	MAX. ÚHRADA ZP 410,- Kč		DOPLATEK PACIENTA 14,- Kč	

Zdravotní stehenní samodržící punčochy s **KRAJKOU**

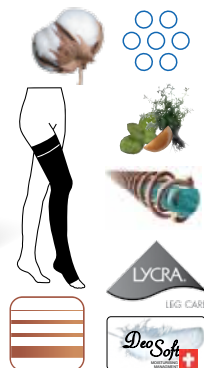

Úprava:	Mikrokapsle - Skintex® AHL - do vyprodání zásob			
Obchodní název:	Avicenum 360 COTTON stehenní punčochy			
Velikosti:	S normal	M normal	L normal	XL normal
	S+ normal	M+ normal	L+ normal	XL+ normal
	S long	M long	L long	XL long
	S+ long	M+ long	L+ long	XL+ long
Barvy:	8001			
Provedení:	otevřená špice			
Balení:	1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku			
KÓD ZP 0161108	MAX. ÚHRADA ZP 600,- Kč		DOPLATEK PACIENTA 48,- Kč	

Zdravotní stehenní samodržící punčochy s LEMEM



Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver			
Obchodní název:	Avicenum 360 COTTON stehenní punčochy			
Velikosti:	S normal	M normal	L normal	XL normal
	S long	M long	L long	XL long
Barva:	8001			
Provedení:	otevřená špiče			
Balení:	1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku			
KÓD ZP 0161111	MAX. ÚHRADA ZP 600,- Kč		DOPLATEK PACIENTA 48,- Kč	


Avicenum 360 ARM SLEEVE

2. kompresní třída (23 - 32 mmHg) **360**

ARM SLEEVE

Kompresivní pažní návlek s rukavicí je určen k léčbě lymfatických otoků paží. Tyto otoky způsobené poruchou odtoku lymfy z postižené končetiny vyžadují trvalou léčbu, jejíž součástí je i kompresivní terapie. Výsledkem této terapie má být vymizení nebo stabilizace otoku. Materiál pažního návleku je doplněn **příjemným mikrovláknem**, povrchová úprava navíc obsahuje antimikrobiální úpravu **Sanitized® Silver**.

Složení: 60 % Nylon, 40 % Lycra®

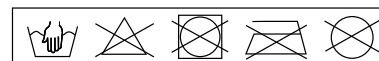

Zdravotní pažní návlek s LEMEM



Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver			
Obchodní název:	Avicenum 360 pažní návlek			
Velikosti:	S normal	M normal	L normal	XL normal
	S long	M long	L long	XL long
Barva:	8001			
Provedení:	s rukavicí		bez rukavice	
Balení:	1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku			
bez rukavice 0140694	MAX. ÚHRADA ZP 277,- Kč		DOPLATEK PACIENTA 0,- Kč	
s rukavicí 0140695	MAX. ÚHRADA ZP 360,- Kč		DOPLATEK PACIENTA 0,- Kč	
ramenní úchyt 0140695	MAX. ÚHRADA ZP 360,- Kč		DOPLATEK PACIENTA 0,- Kč	


Avicenum 520 kompresivní terapie křečových žil a otoků nohou

Zdravotní kompresivní punčochy 3. kompresní třídy určené k léčbě chronické žilní nedostatečnosti a lymfatických otoků.

Jde o zásadní součást terapie, zvláště po lymfatických drenážích pomáhají významně bránit návratu lymfy do místa otoku. Účinně působí proti tvorbě nových křečových žil - varixů, jsou určené pro pokročilejší stádium chronické žilní nedostatečnosti.

Samodržící punčochy byly navrženy s vědomím, že se musí nosit celý den, proto jsou vyrobeny z hebkého mikrovlákná, upraveny nesepratelnou antimikrobiální úpravou s ionty stříbra a opatřeny širokou krajkou, která punčochy spolehlivě drží na noze při jakékoli činnosti.

Složení: 55 % Nylon, 45 % Lycra®

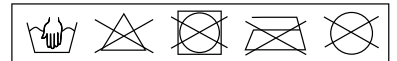


Zdravotní lýtkové punčochy



Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver				
Obchodní název:	Avicenum 520 lýtkové punčochy				
Velikosti:	S normal	M normal	L normal	XL normal	XXL normal
	S long	M long	L long	XL long	XXL long
Barvy:	8001				
Provedení:	uzavřená špice				
Balení:	1 pár v krabičce, 8 krabiček v kartonku				
KÓD ZP 0140837	MAX. ÚHRADA ZP 450,- Kč		DOPLATEK PACIENTA 18,- Kč		

Zdravotní stehenní samodržící punčochy s LEMEM

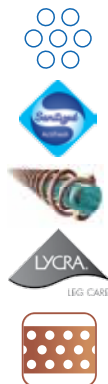


Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver			
Obchodní název:	Avicenum 520 stehenní punčochy			
Velikosti:	S normal	M normal	L normal	XL normal
	S+ normal	M+ normal	L+ normal	XL+ normal
	S long	M long	L long	XL long
	S+ long	M+ long	L+ long	XL+ long
Barvy:	8001			
Provedení:	uzavřená špice			
Balení:	1 pár v krabičce, 4 krabičky v kartonku			
KÓD ZP 0140838	MAX. ÚHRADA ZP 600,- Kč		DOPLATEK PACIENTA 110,- Kč	

Avicenum DiaFit ponožky pro diabetiky

Ponožky Avicenum **DiaFit** s 90 % česané dlouhvlákné bavlny jsou jednou z prevencí diabetické nohy. **Příjemný zdravotní lem** s velmi jemným svěrem zabraňuje vzniku otlaků na noze, je však dostatečně pevný, aby nedocházelo k sklouzávání ponožky. Špice je zakončena **řetízovaným spojem**, šev je tedy plochý a nezpůsobuje

na noze otlaky. Nesepratelné švýcarské antimikrobiální stříbro **Sanitized® Silver** působí preventivně proti plísňovým a kvasinkovým onemocněním nohou, zvyšuje komfort nošení a zabraňuje vzniku nepříjemných pachů.

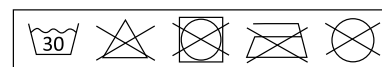

Složení: 90 % Cotton (bavlna), 8 % Nylon, 2 % Lycra®



Bavlněné ponožky pro diabetiky

Úprava:	Antimikrobiální stříbro - Sanitized® Silver			
Obchodní název:	Avicenum DiaFit ponožky			
Velikosti:	36 - 39	39 - 42	41 - 44	44 - 47
Barvy:	0000	5090	7001	7007
	8000	8080	9999	
	8080 není ve velikosti 36 - 39			
Balení:	1 pár v obalu s háčkem v sáčku			

DESATERO PÉČE O NOHY DIABETIKA

- 1 Noste dobře padnoucí obuv.
- 2 Denně nohy prohlížejte.
- 3 Nekuřte.
- 4 Dodržujte správnou hygienu.
- 5 Odstraňujte opatrně zatvrdlou kůži.
- 6 Noste kvalitní bavlněné ponožky.
- 7 Nevystavujte nohy extrémnímu chladu či horku.
- 8 Navštěvujte pravidelně odbornou pedikúru.
- 9 Při potížích navštivte vždy odborníky.
- 10 Při každé návštěvě svého lékaře dbejte, aby byla Vaším nohám věnována pozornost.

Navlékač kompresivních punčoch Avicenum


Navlékač Avicenum poskytujeme zdarma jako automatickou součást balení každého výrobku Avicenum 2. a 3. kompresní třídy. Nyní ho však můžete v případě potřeby zakoupit i samostatně. Jedná se o jednoduchou pomůcku pro snadnější natažení punčoch přes nejproblematičtější část – nárt. Navlékač vyrábíme ve 2 velikostech.

Punčochy velikostí S – M obsahují menší navlékač vel. 1.


Punčochy velikostí L – XXL obsahují navlékač větší vel. 2.



Oblékání punčoch bez špičky

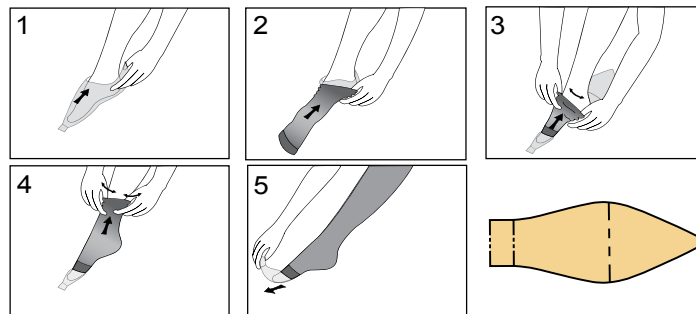

Oblékání punčoch se špičkou

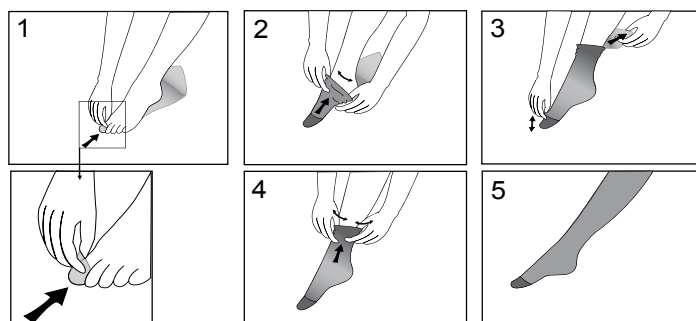

Skleněný pilník Glasscare

Unikátní český výrobek ze skla pro šetrnou péči o nohy nejen diabetiků. **Patentovaný pilník pro jemnější a efektivnější způsob odstraňování zatvrdnuté a poškozené kůže chodidel.**

Vroubkovaný povrch na jedné straně určený pro odstraňování poškozené kůže a jemná strana pilníku pro vyhlazení už suchých chodidel a úpravu nehtů. Praktický prodloužený tvar pro pohodlnou a jednoduchou manipulaci. Díky použitému sklu jako materiálu je pilník absolutně hygienický.

Rozměr: 3,5x25 cm

Balení: 1 kus



Kompresivní účinky výrobků řady Avicenum

<i>Avicenum</i>	Kompresní třída/ komprese	Komprese v měřicím bodě b, oblast zápatí mmHg	Stádium	Indikace	Produkty
Podpůrné punčochy	Support Velmi lehká	< 18	C0	<ul style="list-style-type: none"> stav bez příznaků prevence vzniku varixů a otoků během těhotenství prevence vzniku otoků při cestování prevence tromboembolické nemoci 	Avicenum 70
Zdravotní kompresivní punčochy	1. Lehká	18 - 21	C0 - C1	<ul style="list-style-type: none"> metličkové žíly unavené a těžké nohy příležitostný nebo večerní otok nekomfortní pocit v nohou po dlouhém stání nebo sezení (riziková povolání) prevence před rozvojem varixů v těhotenství prevence cestovní trombózy prevence tromboembolické nemoci u imobilizovaných pacientů 	Avicenum 140 Avicenum 310 Avicenum ANTI-TROMBO PREMIUM
	2. Středně silná	23 - 32	C2 - C4	<ul style="list-style-type: none"> chronické žilní onemocnění výraznější těhotenská varikóza po operaci varixů stav po flebotrombóze zhojený bércový vřed výrazná varikóza se sklonem k edémům 	Avicenum 360
	3. Silná	34 - 46	C5	<ul style="list-style-type: none"> pokročilé chronické žilní onemocnění výrazné edémy kožní změny lymfedémy pokročilá flebitida stavy po recidivujících ulceracích sekundární varikóza 	Avicenum 520

Avicenum v Registru zdravotnických prostředků

Všechny výrobky řady Avicenum splňují požadavky zákona 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Notifikace výrobků řady Avicenum, udělená Státním ústavem pro kontrolu léčiv, je platná do roku 2021.

Notifikace je zárukou, že výrobky Avicenum:

- mají platné CE prohlášení o shodě dle požadavků evropské směrnice 93/42/EEC,
- bylo provedeno klinické hodnocení s ohledem na účinnost a bezpečnost výrobku a
- kompresivní vlastnosti výrobku byly ověřeny certifikovanou laboratoří v Hohensteinu.

Databáze notifikovaných zdravotnických prostředků je dostupná ve veřejné části Registru zdravotnických prostředků na www.rzpro.cz.

Žilní poradna

Trápí Vás bolesti nohou, otoky nebo křečové žíly? Potřebujete poradit s léčbou nebo prevencí? Chtěli byste se zeptat špičkového odborníka?

Navštivte naši Žilní poradnu na webových stránkách www.zilni-poradna.cz.

O problémech zde srozumitelně píší a na Vaše přímé dotazy nestranně odpovídají lékaři, kteří jsou ve svém oboru uznávanými autoritami.



Další informace:  www.facebook.com/zilni.poradna.avicenum

 www.youtube.com/AriesTVstream

Ještě více informací o problematice křečových žil, jak pro laiky, tak odborníky, naleznete na www.krecove-zily.cz.

Topíte se v informacích?



Někdy je lepší jednoduché vysvětlení. O punčochách, měření, oblékání, individuální výrobě či úhradách si s Vámi rád popovídá náš farmaceut Mgr. Renata Čížková. Přímě ve Vaší lékárně či výdejně. Názorně a na přání. Obdržíte certifikát o proškolení výrobcem. Domluvte si setkání na tel.: +420 734 150 720.

Barevnice Avicenum


	0000 BÍLÁ		5090 TMAVĚ MODRÁ		7001 STRÍBŘITĚ ŠEDÁ		7006 ŠEDOHNĚDÁ
	7007 ANTRACIT		8000 SVĚTLÁ		8001 NATURA		8002 BRONZ
	8003 SAHARA		8005 TABÁK		8080 ČOKOLÁDA		9999 ČERNÁ

Postup při měření a určení velikosti zdravotních výrobků Avicenum

Při určování velikosti, prosím, věnujte **pozornost měření**. Závisí na něm správná funkce punčochy/pažního návleku. Měření provádějte **po ránu**. V průběhu dne končetiny natékají.

Změřte všechny body, které vyžaduje tabulka velikostí daného výrobku. Umístění na končetině ilustrují obrázky. Při volbě velikosti jsou nejdůležitější **hodnoty, které mají v tabulce šedé pozadí**.


Body měření – paže

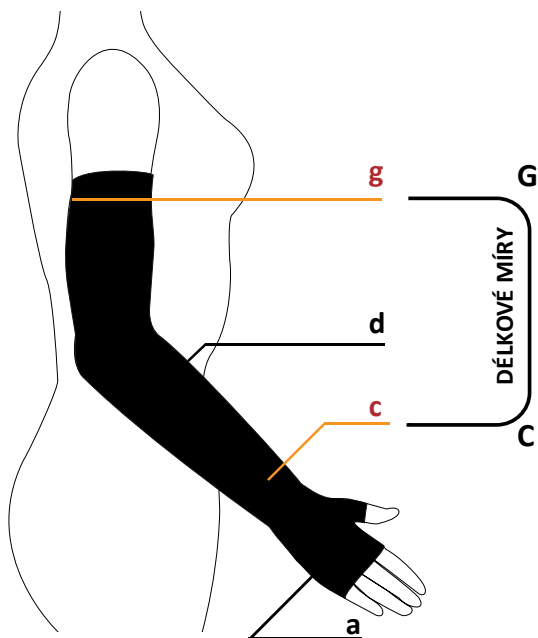

- a obvod dlaně
- c obvod zápěstí
- d obvod předloktí
- g obvod pod paží

C – G délková míra

Body měření – noha

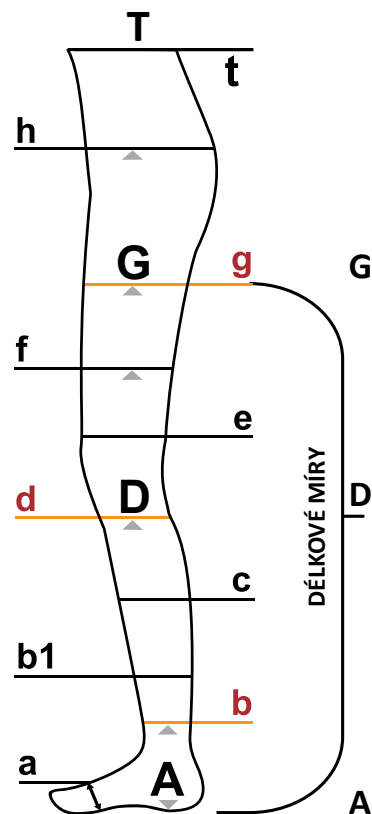

- a obvod chodidla
- b obvod nad kotníkem
- b1 obvod 10 cm nad kotníkem
- c obvod lýtky
- d obvod pod kolenem
- e obvod nad kolenem
- f obvod stehna (v půli stehna)
- g obvod stehna (5 cm pod rozkrokem)
- h obvod boků
- t obvod pasu

Délkové míry

A – D lýtková punčocha

A – G stehenní punčocha

Avicenum 140

31

Velikost		Obvod nohy v měřených bodech					
nová	stará	b	d	f	g	h	t
S	1	20 – 24	34 – 37	46 – 50	50 – 55	110	80
M	2	24 – 27	37 – 40	50 – 54	55 – 60	120	90
L	3	27 – 30	40 – 44	54 – 58	60 – 66	130	100

Délka			
nová	normal	long	
stará	K krátká	D dlouhá	
Lýtkové	A – D	do 37	nad 37
Stehenní Punč. kalhoty	A – G	do 70	nad 70

Avicenum 360/Avicenum 520

Velikost		Obvod nohy v měřených bodech									
nová	stará	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
S-	1-	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	37 – 45	42 – 52	100	70
S	1	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	41 – 49	47 – 57	110	80
S+	1+	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	49 – 57	57 – 67	110	80
M-	2-	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	40 – 48	47 – 57	110	80
M	2	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	45 – 53	52 – 62	120	90
M+	2+	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	53 – 61	62 – 72	120	90
L-	3-	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	45 – 53	52 – 62	120	90
L	3	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	49 – 57	57 – 67	120	90
L+	3+	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	57 – 65	67 – 77	130	100
XL-	4-	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	49 – 57	57 – 67	120	90
XL	4	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	53 – 61	62 – 72	130	100
XL+	4+	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	61 – 69	72 – 82	130	100
XXL	5	31 – 37	32 – 35	37 – 42	44 – 50	43 – 49	45 – 51	57 – 65	67 – 77	130	100

Délka			
nová	short	normal	long
stará	UK ultra krátká	K krátká	D dlouhá
Lýtkové	A – D	34 – 38	38 – 43
Stehenní Punč. kalhoty	A – G	56 – 62	62 – 71
		62 – 71	71 – 82

Avicenum ANTI-TROMBO

Velikost	Měřený obvod v bodě		
	b	d	g
S	17 – 20	28 – 34	41 – 54
M	20 – 23	31 – 37	48 – 61
L	23 – 26	34 – 40	55 – 68
XL	26 – 29	37 – 43	62 – 75
XXL	29 – 32	40 – 46	69 – 82

Avicenum 360 ARM SLEEVE (pažní návlek)

Velikost		Obvod ruky v měřených bodech			
nová	stará	a	c	d	g
S	1	do 18	16 – 19	22 – 26	24 – 30
M	2	do 20	19 – 22	26 – 30	30 – 36
L	3	do 23	22 – 25	30 – 34	36 – 42
XL	4	do 25	25 – 28	34 – 38	42 – 48

Délka		
nová	normal	long
stará	K krátká	D dlouhá
C – G	do 45	od 45

Avicenum 70

Velikost AT	
nová	stará
S	158-164/100
S+	158-164/116-124
M	164-170/108
M+	164-170/116-124
L	170-176/108-116
L+	170-176/116-124
XL	176-182/108-116
XL+	176-182/116-124

Velikost AG	
nová	stará
M	25
L	27
XL	29

Tento materiál má pouze informativní charakter a není závaznou nabídkou.

ARIES, a.s.

512 33 Studenec 309

IČ 288 24 563

DIČ CZ288 24 563

www.aries.eu**Objednávky:**

Expediční středisko Vrchlabí

Žižkova 507

543 01 Vrchlabí


Marta Michaličková

vedoucí expedice

Po – Pá 6:00 – 17:00

Zelená linka: **800 112 595**

Mobil: 605 711 777

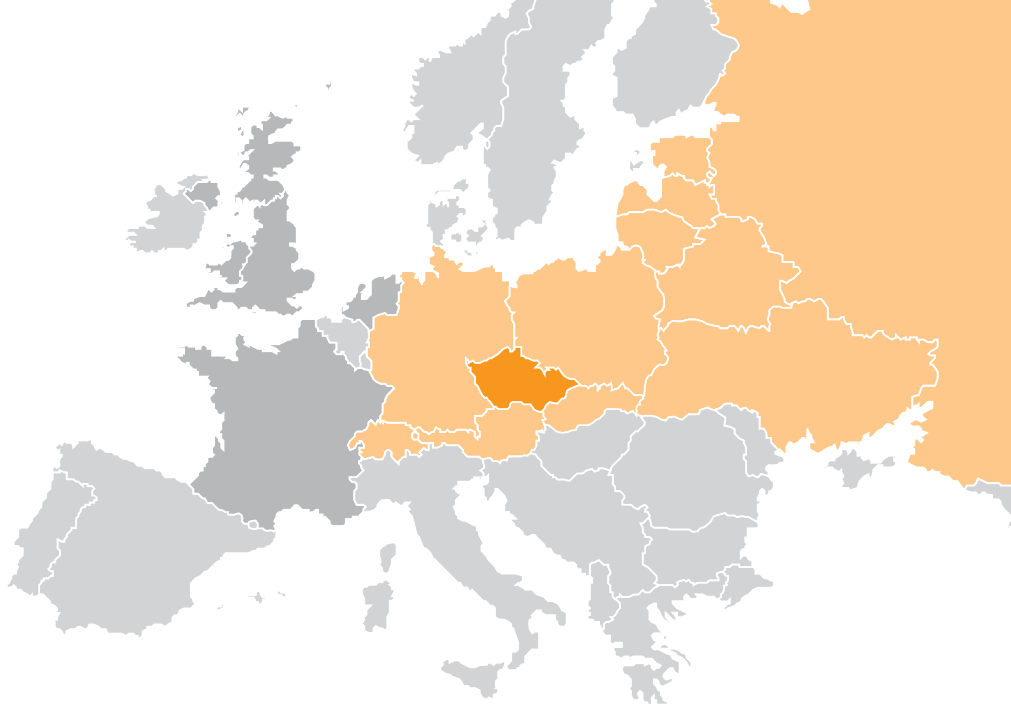E-mail: expedice@aries.eu**Oddělení péče o zákazníka:****PharmDr. Dalibor Ďurďa**

Po – Pá 8:00 – 18:00

Zelená linka: **800 111 595**

Telefon: 481 595 111

E-mail: info@aries.eu**Ředitel obchodu pro ČR:****Ing. Tomáš Trnka**

Mobil: 603 321 621

E-mail: trnka@aries.eu**Váš obchodní kontakt:**